


09/ Aufbereitung von Medizinprodukten (Dentalinstrumente)

E/ Dokumentation der Aufbereitung und Lagerung von Medizinprodukten

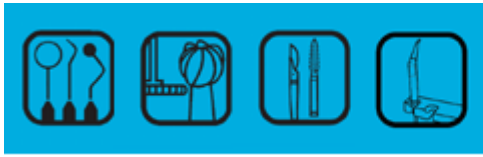

Die hygienische Aufbereitung von Dentalinstrumenten ist ein wesentlicher Bestandteil der Praxishygiene, indem der Gefahr von Kreuzinfektionen vorgebeugt wird.

Dokumentation der Aufbereitung von Medizinprodukten

Die Aufbereitung von unkritischen Medizinprodukten muß nicht dokumentiert werden.

Die Aufbereitung von semikritischen Medizinprodukten A/B und kritischen Medizinprodukten A/B muß dokumentiert werden.

Die Aufzeichnungen müssen 10 Jahre aufbewahrt werden.

Es empfiehlt sich, in der Patientenakte zur besseren Rückverfolgbarkeit die Anwendung steriler Medizinprodukte zu dokumentieren.

Lagerung von Medizinprodukten

Sterilgut kann in Sterilisiergutbehältern, Klarsichtsterilisierverschließungen und Sterilisierpapier bis zu 6 Monaten gelagert werden, wenn die Lagerung trocken und staubgeschützt in Schränken oder Schubladen erfolgt, Mehrfachverpackungen (Sterilgutlagerverpackungen) sogar bis zu 5 Jahren. Ist die Lagerzeit abgelaufen, muss das Medizinprodukt neu verpackt und sterilisiert werden. Bei Sterilisierbehältern mit eingelegtem Papierfilter ist vor der erneuten Sterilisation nur dieser zu wechseln.